



Juntos le ayudamos a...

*Capturar la belleza real*

Sabemos lo apasionado que eres al ayudar a cada uno de tus pacientes a obtener la visión que merecen. Es por eso que nos entusiasma crear lentes de contacto diseñados para ofrecer un rendimiento visual increíble. Juntos ayudamos a las personas a ver la belleza del mundo y a disfrutar haciendo lo que les apasiona con una visión nítida

PORQUE A TI Y A NOSOTROS NOS IMPORTA

**¡NUEVO!**

**Biofinity® toric multifocal**

Lentes de contacto de reemplazo mensual



Diseñado para mantener a sus pacientes astigmas en lentes de contacto a medida que se vuelven presbítas.

*Una combinación de tecnologías y diseños ópticos comprobados*

### Geometría Optimizada™

Proporciona excelente estabilidad, orientación predecible y un desempeño de visión consistente.



### Balastro suave y continuo

Maximiza la comodidad durante la interacción con los párpados.

### Curvatura única de superficie posterior

Reduce el movimiento sobre el ojo para apoyar el posicionamiento estable del lente.

### Zona óptica amplia


Ayuda a proporcionar buen rendimiento visual.

### Espesor ISO horizontal uniforme

Mejora la estabilidad y reduce la rotación para una mejor agudeza visual.

### Diseño tórico de balastro optimizado

Proporciona una adaptación cómoda y estable.

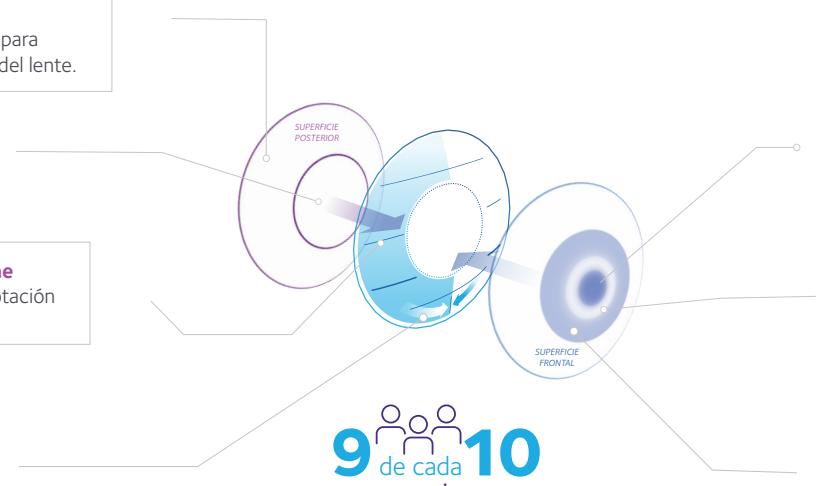

9 de cada 10 usuarios

están satisfechos con el rendimiento visual general de Biofinity® toric multifocal\*1

### Zona central esférica

Lente D: Visión lejana

Lente N: Visión cercana

### Zona progresiva

Visión Intermedia

### Zona periférica esférica

Lente D: Visión cercana

Lente N: Visión lejana



Biofinity® toric multifocal **cumple o excede las necesidades de la** mayoría de usuarios en cuanto a **comodidad durante todo el día**.<sup>2</sup>



**9 de cada 10** usuarios están de acuerdo en que se sintieron **satisfechos con el rendimiento de visión general** de Biofinity® toric multifocal después de 1 mes de uso.<sup>3</sup>



**93%** de los usuarios coinciden en que Biofinity® toric multifocal los hizo **sentirse seguros** al realizar sus actividades diarias después de 1 mes de uso.<sup>4</sup>



Biofinity® toric multifocal proporciona **muy buena agudeza visual de lejos (20/20)** al momento de la entrega y después de 1 mes de uso<sup>5</sup>

## Proporciona corrección para casi 100% de tus pacientes con astigmatismo y presbicia<sup>6</sup>

Más de 200,000  
opciones de prescripción

Para que te sientas seguro de que estas tomando la decisión correcta para las necesidades de tus pacientes<sup>7</sup>

Material	Contenido de agua	Curva Base (mm)	Diameter (mm)	Poder esférico	Poder cilíndrico	Ejes	Adiciones	Dk/t @-3.00D	Diseño	Reemplazo
comfilcon A	48%	8.7	14.5	+10.00D to -10.00D (0.50D steps after ± 6.00D)	-0.75D to -5.75D; 0.50D steps	5° a 180° Pasos de 5°	+1.00D, +1.50D, +2.00D, +2.50D	116	Lente D Lente N	Mensual

**1** CVI data on file, 2021. Prospective, patient-masked, bilateral dispensing study at 8 sites in North America. 56 habitual SCL wearers were fitted with Biofinity® toric multifocal and wore for 1 month, daily wear. **2** CVI data on file, 2021. Prospective, patient masked, bilateral dispensing study at 8 sites in North America. 56 habitual SCL wearers were fitted with Biofinity toric multifocal and wore for 1-month, daily wear. **3** CVI data on file, 2021. Prospective, patient masked, bilateral dispensing study at 8 sites in North America. 56 habitual SCL wearers were fitted with Biofinity toric multifocal and wore for 1-month, daily wear. When considering the vision requirements needed for the varied activities they performed during a typical day. **4** CVI data on file, 2021. Prospective, patient masked, bilateral dispensing study at 8 sites in North America. 56 habitual SCL wearers were fitted with Biofinity toric multifocal and wore for 1-month, daily wear. On dispensing, logMAR VA was -0.01 and 0.01 at 1 month. **5** CVI data on file, 2021. Prospective, patient masked, bilateral dispensing study at 8 sites in North America. 56 habitual SCL wearers were fitted with Biofinity toric multifocal and wore for 1-month, daily wear. On dispensing, logMAR VA was -0.01 and 0.01 at 1 month. **6** CVI data on file, 2020. Rx coverage database; 42 to 70 years ≥0.75DC. **7** CVI data on file 2019. Based on total number of prescription option combinations (for sphere, cylinder, axis and add - including D & N combinations) manufactured. ©2022 CooperVision 12852 6/22

PORQUE A TI Y A NOSOTROS NOS IMPORTA.